

Aparat za čišćenje kože, mitesera i masnoće

Korisničke upute



Dobrodošli u inFace upute

InFace ultrazvučni instrument za ionsko čišćenje kože neovisno razvija i proizvodi ga tvrtka Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., koja je povezana sa Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd. proizvodi kao osnovni koncept dizajna, a kao svrhu stvoriti tehnološki lijepe proizvode, nastojeći kontinuirano istraživati i inovirati.

UVOD

- Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe proizvoda i pravilno ga pohranite. Ovo je osobni proizvod i ne preporučuje se za više osoba.
- Ako je kabel za punjenje oštećen, možete ga zamijeniti drugim kabelom za punjenje Type-C.
 - Ako osjetite bol ili abnormalnost na koži ili tijelu, odmah je prestanite koristiti.
 - Pri čišćenju i brizi za instrument isključite kabel za napajanje (izvodi se u isključenom stanju).
 - Ne dopustite djeci da koriste ovaj proizvod.
 - Ne koristite ovaj proizvod u blizini zapaljivih materijala (alkohol, benzin, sredstvo za uklanjanje laka, ezola itd.) ro
 - Ne koristite ovaj proizvod ako je oštećen uslijed pada ili sudara.
 - Nemojte sami rastavljati ili popravljati ovaj proizvod. Za pitanja popravka obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

- Upotrijebite tvornički isporučeni kabel za punjenje kako biste osigurali da napon udovoljava specifikacijama proizvoda.
- Instrument treba očistiti na vrijeme kako bi se izbjeglo nakupljanje masti i ostataka.
- Ovaj instrument nema vodonepropusno dno, nemojte ga potapati u vodu ili ga izravno prati slavinom; Zabranjeno ga je koristiti u kadi, nemojte koristiti ovaj instrument u blizini kade, sudopera ili drugog posuđa napunjenog vodom.





- Slijedeće je osobe ne bi trebale koristiti:
- Zene tijekom trudnoće ili menstruacije.
 - Alergični ljudi, postoje kožne bolesti, dermatitis, kožne alergije i jake opekline.
 - Osobe s oštećenjima kože, ekcemima, oteklinama itd.
 - Ljudi koji se oporavljaju nakon operacije.
 - Oni koji su podvrgnuti plastičnoj operaciji lica ili ugrađenoj operaciji.
 - Oni koji su nedavno operirani (poput laserskog obnavljanja kože, kemijske dermoabrazije ili zagrijavanja rana itd.)
 - Pacijenti s urođenom bolešću srca.
 - Osobe s poremećajima živaca lica.
 - Ljudi od pijenja alkohola, uzimanja lijekova, pretjeranog umora ili lošeg zdravlja.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Dubinsko čišćenje
- Uvoz prehrane
- Podizanje i učvršćivanje
- Sjaj

DETALJI O PROIZVODU

- Slijedeći predmeti moraju biti u paketu:
- Ultrazvučni instrument za čišćenje kože inFace x1
 - Kabel za punjenje Type-C x1
 - Korisničke upute x1

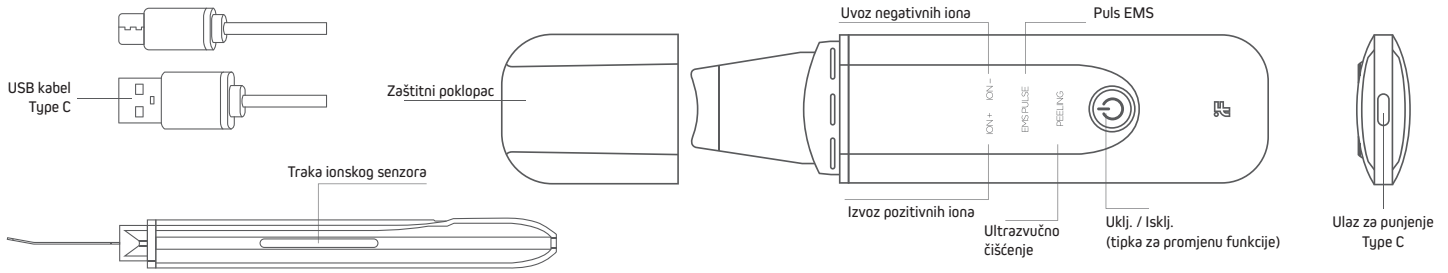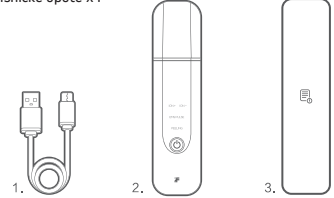

Način rada: Pritisnite i držite 1,5 sekundu da biste se uključili, kratko pritisnite da biste prebacili način rada, a zatim dugo pritisnite 1,5 sekunde da biste isključili.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

ČIŠĆENJE

Način ultrazvučnog čišćenja: PILING (koristi se sa sredstvom za čišćenje lica / mlijekom za čišćenje)

- Nakvasite lice mlakom vodom, upotrijebite sredstvo za čišćenje / čišćenje lica za oslobađanje pjene.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje / isključivanje da biste pokrenuli zadani način PEELING.
- Lopata je okrenuta prema unutra, glava lopate je dolje blizu kože, a glava lopate polako se pomiče uz pore kako bi se čistila 3 minute.



DUBOKO ČIŠĆENJE

Način izvoza pozitivnih iona: ION+ (koristi se s tonikom / losionom)

- Nanesite odgovarajuću boju sa strane
- Kratko pritisnite gumb za napajanje za odabir načina ION+.
- Lice kože je usmjereno prema unutrašnjosti, glava lopate prema dnu i blizu kože. Polako pomaknite glavu kore prema smjeru pora, nakon dubinskog čišćenja tijekom 3 minute, isperite lice toplom vodom.



HRANJIVE TVARI

Način uvoza negativnih iona-ION- (koristi se s kremom za učvršćivanje / maskom)

- Ultrajetno odgovarajući serum / losion u vosak.
- Odaberite ION- način.
- Lopata je okrenuta prema van, glava lopate je podignuta, blizu kože, a glava lopate polako se pomiče u smjeru pora i masira 3 minute.



OPUŠTAJUĆA MASAŽA


EMS Pulse način - EMS PULSE (koristi se s kremom za učvršćivanje)

- Neka vaše lice bude vlažno.
- Odaberite EMS PULSE način.
- Lopata je okrenuta prema van, glava lopate je podignuta, blizu kože, polako pomiješajte glavu lopate u smjeru pora, masirajte kako biste kožu umirili 3 minute.



SAVJETI

- Kad ga upotrebljavate, trebate držati traku s ionskim osjetnikom na bočnoj strani instrumenta, glava za njegu dodiruje kožu, EMS i ionski fond mogu normalno raditi.
- Kut noža treba raditi prema prikazanom na slici (približno 45 stupnjeva).
- Nemojte dugo držati na licu tijekom nanošenja, trebalo bi se polako kretati.
- Ako na licu imate upalu, upotrijebite proizvod nakon nestanka simptoma.
- Preporuča se koristiti ga 2-3 puta tjedno, nemojte ga koristiti nekoliko puta dnevno.
- Tijekom rada oštrica i tijelo moraju biti čisti.

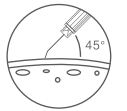

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Ne koristite hlapljive, oštre ili korozivne razrjeđivače za čišćenje instrumenta.
- Za nježno čišćenje možete koristiti meku, vlažnu krpu ili pamučnu podlogu.
- Ne ispirajte instrument izravno vodom.
- Ako se instrument neće koristiti duže vrijeme (oko 3 mjeseca), izvadite ga i napunite do kraja prije spremanja kako biste izbjegli oštećenje baterije unutar instrumenta zbog nedostatka električne energije.

ZAŠTITA I USLUGA POSLJE PRODAJE

- inFace nudi jednogodišnje jamstvo na proizvode u skladu sa standardom usluge "Nova tri nacionalna jamstva". Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje.
- Tijekom jamstvenog razdoblja, za kvar proizvoda zbog nedostataka u materijalu ili proizvodnom procesu, zamijenit ćemo dijelove ili cijeli proizvod prema potrebi.
- Da biste zadržali jamstvo, proizvod i dokaz (račun za kupnju) koji mogu dokazati datum kupnje moraju se dostaviti pošti zastupnika.
- Slijedeći uvjeti nisu pokriveni jamstvom:
 - Šteta nastala nepravilnom uporabom, na primjer nepravilnim napajanjem, umetanjem proizvoda u neodgovarajući utičnicu, umjetna šteta itd.
 - Starenje proizvoda i trošenje uzrokovano uobičajenom uporabom, ali ima malo utjecaja na funkciju proizvoda.
 - C. U druge svrhe, ili nepravilnog rada ili neprofesionalnog održavanja i upotrebe pribora koji nisu od naše tvrtke, što rezultira problemima s proizvodom.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Ovaj proizvod, piling i pribor za pakiranje izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati.
- Podijelite otpad u različite "reciklirajuće količine" kako biste olakšali recikliranje korisnih materijala.



ODLAGANJE OTPADA

Ova oznaka na ovom proizvodu, priručniku s uputama ili omotu označava da se ovaj proizvod na kraju korisnog vijeka ne može tretirati kao opći kućni otpad. Posavjetujte se s lokalnom upravom za recikliranje na temelju klasifikacije otpada.



TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv proizvoda: Ultrazvučni instrument za ionsko čišćenje kože
 Kapacitet baterije: 500 mA
 Radni napon: 3,75 V
 Nazivna snaga: 1,5 W
 Veličina proizvoda: 172 X 42 X 15mm
 Veličina pakiranja: 220 x 63 X 40mm
 Neto težina: oko 135g

Napomena: Slike proizvoda prikazane u ovom priručniku i uvođenje srodnih značajki proizvoda, kao i objašnjenje nekih pojmova, samo su za referencu. Korisnik će prevladati u prirodi. S obzirom na dosljednu politiku kontinuiranog poboljšanja proizvoda, tvrtka zadržava pravo mijenjati specifikacije proizvoda bez prethodne najave.

JAMSTVENA KARTICA

inFace **JAMSTVENA KARTICA**

Broj proizvoda: _____
 Datum kupnje: _____
 Korisničko ime: _____
 Adresa korisnika: _____
 Kontakt broj: _____
 Naziv proizvođača: _____
 Podaci o zastupniku: _____
 Broj narudžbe: _____
 Opis kvara: _____

(Molimo vas da detaljno popunite sadržaj jamstvene kartice tijekom zahtjeva za servis, ovaj proizvod ima jednogodišnje jamstvo)

Naziv proizvoda: Ultrazvučni instrument za ionsko čišćenje kože
 Model proizvoda: MS7100
 Datum proizvodnje: _____
 Provjera kvalitete: _____



Skenirajte da biste dobili korisničke upute

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon: 400-007-8388
 WeChat servis: migooSMART
 Podaci o tvrtki: Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.
 Shenzhen inFace Technology Co. Ltd
 Adresa: Soba B07, zgrada U6, industrijski park pametne proizvodnje Junxiang UB, avenija Hangcheng, zajednica Gushu, ulica Xixiang i okrug Baoan, Shenzhen
 Email: service@migooSMART.com
 Poštanski broj: 518000



Služba za korisnike WeChat-a