

Mi Body Composition Scale 2


Vaga s funkcijom mjerenja tjelesne masnoće

Mjere opreza

1. Ne stavljajte utege na mokre i skliske površine i ne smijete stajati na vagi mokrim nogama ili stajati na mokrim površinskim utezima kako biste izbjegli klizanje.
2. Pri vaganju obje noge moraju biti smještene u središtu vage kako bi se izbjeglo prevrtanje uređaja.
3. Radno okruženje mora biti suho, zabranjeno je stavljanje utega u vodu.
4. Koristite vlažnu krpu i neutralni deterdžent za čišćenje površine utega, dodira s organskim otapalima
5. Kad se baterija napuni, odmah izvadite bateriju kako biste izbjegli istjecanje elektrolita i oštećenje vage.
6. Osobama s elektrostimulatorom srca i drugom medicinskom opremom ne preporučuje se korištenje ovog uređaja. U analizi tjelesne građe profesionalnih sportaša, trudnica ili drugih, koji su nekoliko posebnih odredbi, rezultat može biti pogreška.

Instaliranje baterije

Otvorite poklopac odjeljka za baterije, u smjeru kako je prikazano na slici i umetnite četiri baterije.

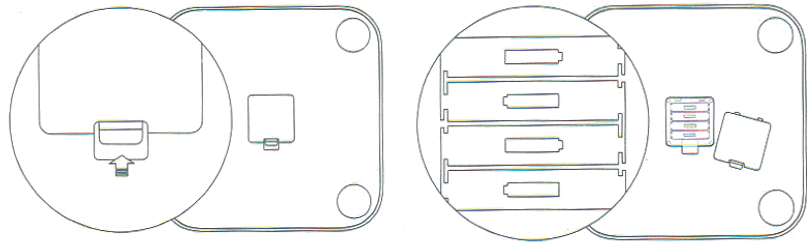

Specifikacije

Dimenzije: 300 mm x 300 mm x 25 mm;
Neto težina: 1,7 kg;
Granica mjerenja: 100 g - 150 kg;
Mjerne jedinice: kg / lbs;
Korak mjerenja: 0.1 kg / lbs;
Materijal kućišta: Kaljeno staklo / ABS plastika;
Bežična veza: Bluetooth 5.0;
Radna temperatura 0 ° C ~ 40 ° C;
Baterija: 4 AAA baterije;
Zahtjevi za hardver: OS Android 4.4 / iOS 9.0;
i novije verzije, podržava Bluetooth 4.0.

Instaliranje aplikacije

Unesite u pretragu «Mi Fit» u trgovini aplikacija Xiaomi ili App Store ili skenirajte QR-kod u nastavku da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju.



Dodavanje vage

Otvorite aplikaciju MiFit Xiaomi i dodajte vage, slijedite upute za unos osobnih podataka. Nakon dodavanja vage pogledajte povijest vaganja i informacije o stanju tijela u mobilnoj aplikaciji.

Upotreba

Stavite vagu na tvrdu, ravnu površinu. Stanite bosu na površini vage kako je prikazano na slici, pruža dobar kontakt kože s dvije metalne elektrode.

Jednom kad se pokazatelj težine stabilizira, započinja mjerenje sastava tijela. Kad indikator napretka ispod težine zaslona trepće, što znači da je mjerenje dovršeno, tada možete pristupiti aplikaciji MiFit za pregled podataka o tjelesnoj građi.

Sastav tijela koji uređaj prikazuje, koristi se samo u informativne svrhe i nije medicinsko mišljenje.




Postavljanje jedinica težine


U tvorničkim postavkama Xiaomi vaga instaliranih «jing», otvorite Mi Fit, postavke izbornika s zamjenskim utezima jedinice opreme. Vaga podržava tri mjerne jedinice, «Jin», «kg» i «lb».

Savjeti

Ako ikona <L> treperi tijekom vaganja, znači da je baterija prazna, zamijenite bateriju.

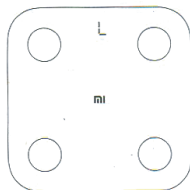

Ako ikona treperi tijekom vaganja, to znači da su mjerenja premašila maksimalnu granicu od 150 kg težine.

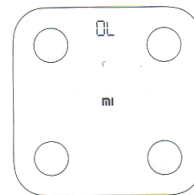

Popis grešaka

Neuspjeh u funkcijama, spomenutim u priručniku. Ne možete uključiti uređaj, nemoguće je izmjeriti težinu i tjelesnu masnoću.

Nema slike na zaslonu / prisutne su pogreške / pokvareni pikseli.

Nije moguće sinkronizirati s ovim uređajima.

Ispucajte ljusku nastalu zbog korištene strukture ili materijala.

Sljedeći uvjeti nisu obuhvaćeni jamstvo:

1. Kvarovi u kvaliteti koji proizlaze iz neovlaštenog popravka, zlouporabe, pada u tekućinu, nezgode, preinake, zlouporabe komponenata, a nisu predviđene za ovaj uređaj ili instaliraju sistemski softver; razbiti, popraviti naljepnice ili serijski broj uređaja.
2. Istek jamstva. 3. Šteta, nastala višom silom. 4. Ne ispunjava greške navedene u «Popisu grešaka»

Naslov i sadržaj štetnih tvari u proizvodu

Naziv dijela	Štetne tvari					
	Pb	Hg	Cd	CrIV	PBB	PBDE
Kućište	O	O	O	O	O	O
Pločica	X	O	O	O	O	O
Podrška	O	O	O	O	O	O

Ova je tablica sastavljena u skladu sa SJ / T 11364.

O: znači da je sadržaj štetnih tvari u homogenom materijalu ove komponente unutar zahtjeva odredbi GB / T 26572.
X: znači da sadržaj štetnih tvari u barem jednom od homogenih materijala ove komponente prelazi granične zahtjeve postavljene GB / T 26572.

Ovaj je proizvod sukladan RoHS propisima o okolišu; Trenutno ne postoji tehnologija koja može zamijeniti ili smanjiti sadržaj olova u elektrotehničkoj keramici i legurama bakra.

Izraz ekološki prihvatljiva upotreba izraza odnosi se na sigurno razdoblje unutar kojeg u normalnim radnim uvjetima sadržanim u ovom proizvodu štetne tvari ili elementi ne predstavljaju opasnost.

Prije upotrebe proizvoda, pročitajte ovaj priručnik i pravilno ga čuvajte

Xiaomi vaga s funkcijom mjerenja tijela masti

Model: XMTZC05HM;

CMIIT ID: 2016DP6264;

Primjenjivi standardi: Q / HM02-201;

Proizvođač: doo «Anhui Huami Informeyshn Technologies»

Adresa: Ekonomska zona Hefei i znanstveni razvoj, ul.

Baza podataka Vantsyansi 800 Dunman, gradnja. A4, Apartman 1201;