

Mi Smart Scale 2


Pametna vaga - tjelesna

Mjere opreza

1. Ne stavljajte utege na mokre i skliske površine i ne smijete stajati na vagi mokrim nogama ili stajati na mokrim površinskim utezima kako biste izbjegli klizanje.
2. Pri vaganju obje noge moraju biti smještene u središtu vage kako bi se izbjeglo prevrtanje uređaja.
3. Radno okruženje mora biti suho, zabranjeno je stavljanje utega u vodu.
4. Koristite vlažnu krpu i neutralni deterdžent za čišćenje površine utega, dodira s organskim otapalima
5. Kad se baterija napuni, odmah izvadite bateriju kako biste izbjegli istjecanje elektrolita i oštećenje vage.
6. Osobama s elektrostimulatorom srca i drugom medicinskom opremom ne preporučuje se korištenje ovog uređaja. U analizi tjelesne građe profesionalnih sportaša, trudnica ili drugih, koji su nekoliko posebnih odredbi, rezultat može biti pogreška.

Instaliranje baterije

Otvorite poklopac odjeljka za baterije, u smjeru kako je prikazano na slici i umetnite četiri baterije.

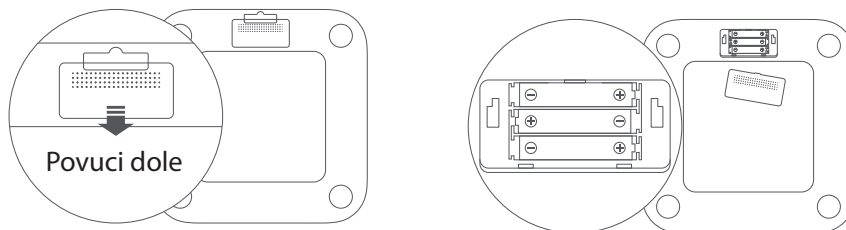

Specifikacije

Dimenzije: 280 mm x 280 mm x 22 mm;
Neto težina: 1,2 kg;
Granica mjerenja: 100 g - 150 kg;
Mjerne jedinice: kg / lbs;
Korak mjerenja: 0.1 kg / lbs;
Materijal kućišta: Kaljeno staklo / plastika;
Bežična veza: Bluetooth 5.0;
Radna temperatura 0 ° C ~ 40 ° C;
Baterija: 3 AAA baterije;
Zahtjevi za hardver: OS Android 4.4 / iOS 10.0;
i novije verzije, podržava Bluetooth 4.0.

Instaliranje aplikacije

Unesite u pretragu «Mi Fit» u trgovini aplikacija Xiaomi ili App Store ili skenirajte QR-kod u nastavku da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju.



Dodavanje vage

Otvorite aplikaciju MiFit Xiaomi i dodajte vage, slijedite upute za unos osobnih podataka. Nakon dodavanja vage pogledajte povijest vaganja i informacije o stanju tijela u mobilnoj aplikaciji.

Upotreba

Stavite vagu na tvrdnu, ravnu površinu. Stanite bos na površini vage kako je prikazano na slici, pruža dobar kontakt kože s dvije metalne elektrode.

Kada indikator težine zatreperi, vaganje je dovršeno i informacije o analizi težine mogu se vidjeti na vašem telefonu.

Težina tijela koji uređaj prikazuje, koristi se samo u informativne svrhe i nije medicinsko mišljenje.




Postavljanje jedinica težine


U tvorničkim postavkama Xiaomi vaga instaliranih «jing», otvorite Mi Fit, postavke izbornika s zamjenskim utezima jedinice opreme. Vaga podržava tri mjerne jedinice, «Jin», «kg» i «lb».

Savjeti

Ako ikona <L> treperi tijekom vaganja, znači da je baterija prazna, zamijenite bateriju.

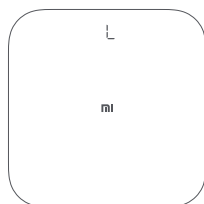

Ako ikona treperi tijekom vaganja, to znači da su mjerenja premašila maksimalnu granicu od 150 kg težine.

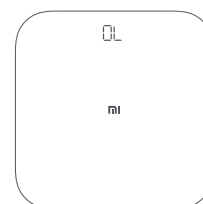

Popis grešaka

Neuspjeh u funkcijama, spomenutim u priručniku. Ne možete uključiti uređaj, nemoguće je izmjeriti težinu i tjelesnu masnoću.

Naziv proizvoda	Lista grešaka
	Vaga Mi Funkcija funkcije opisane u ručno ugrađenom uređaju za vaganje ili zaslonu ne svijetli / pogrešno se pišu riječi (znakovi) / ne može sinkronizirati pukotine zbog curenja podataka zbog građevinskih ili materijalnih uređaja.

Nema slike na zaslonu / prisutne su pogreške / pokvareni pikseli.

Nije moguće sinkronizirati s ovim uređajima.

Ispucajte ljusku nastalu zbog korištene strukture ili materijala.

Sljedeći uvjeti nisu obuhvaćeni jamstvo:

1. Kvarovi u kvaliteti koji proizlaze iz neovlaštenog popravka, zlouporabe, pada u tekućinu, nezgode, preinake, zlouporabe komponenata, a nisu predviđene za ovaj uređaj ili instaliraju sistemski softver; razbiti, popraviti naljepnice ili serijski broj uređaja.
2. Istek jamstva. 3. Šteta, nastala višom silom. 4. Ne ispunjava greške navedene u «Popisu grešaka»

Naslov i sadržaj štetnih tvari u proizvodu

Naziv	Otrovne i opasne tvari ili elementi					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Mi skala	x	0	0	0	0	0

O: otrovne i štetne tvari u svim komponentama uređaja sadržane u količini ispod granice vrijednosti prema SJ / T11363-2006 «zahtjevi koji ograničavaju prisutnost otrovnih i opasnih tvari u proizvodima».

X: označava prisutnost otrovnih i opasnih tvari u najmanje jednoj od komponenata ovog proizvoda koja prelazi ograničenje, prema SJ / T11363-2006 «zahtjevi koji ograničavaju prisutnost otrovnih i opasnih tvari u proizvodima».

Ovaj proizvod udovoljava europskim RoHS zahtjevima i propisima za zaštitu okoliša; međunarodne zemlje još uvijek ne mogu zamijeniti ili smanjiti sadržaj aluminija u leguri bakra.

Xiaomi pametna vaga

Model: XMTZC04HM;

CMIIT ID: 2016DP6264;

Primjenjivi standardi: Q / HM02-201;

Proizvođač: doo «Anhui Huami Informeyshn Technologies»

Adresa: Ekonomska zona Hefei i znanstveni razvoj, ul.

Baza podataka Vantsyansi 800 Dunman, gradnja. A4, Apartman 1201;